

Z Fill Naturlig hud föryngring - Mesoterapi

- stark hydrering av huden genom hyaluronsyra och glycerin
- mesotherapy för ansikte, hals, klyvning, baksidan av handen, och överarmar
- enkel injektion med vass eller trubbig kanyl
- godkända behandlingsprotokoll


Hyaluronsyra glycerin GEL

HA koncentration	18 mg/ml
Stabilisator	Glycerol
Sterilitet	steril
pH	7.0
Dynamisk viskositet	~ 150,000 mPa·s
Molekylvikt	2.5 miljon daltons
Injektion djup	ytliga dermis
Paketering	1 × 1 ml
Nål	2 × 30 G ½
Hållbarhet	3-4 månader

Z Fill refresh² -

Gelen består av högkoncentrerad hyaluronsyra som resulterar och naturliga fuktighetskräm glycerin. Detta anrikas med icke tvärbundna biologiska aktiva hyaluronsyra som resulterar i en långvarig ökning av hudens fukt. Den glycerol binder samtidigt vatten och återfuktar huden i flera månader.

Z Fill application

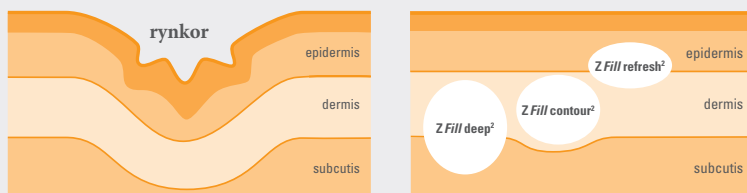

refresh²



Indikationer

pann rynkor ("tanke eller bekymmersrynkor")

Perioral rynkor ("veckade rynkor")

hals, bröst

baksidan av händer och överarmar



Zimmer



Injektionsteknik




Nappage teknik med mikroinjektioner



Linjär retrograd teknik



Fläkt teknik

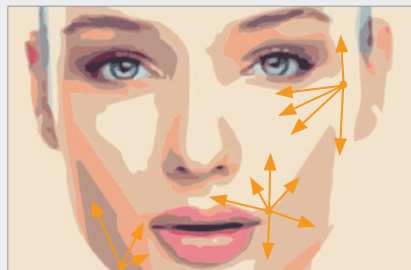


Den trubbiga kanylen erbjuder ett brett spektrum av applikationer. Innan du använder den trubbiga kanylen bekräfta varje godkänd användningsområde.

Application areas



Applikationsexempel

Kombination med mjuk peeling*

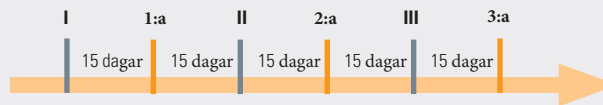


3 behandlingar av Z Fill refresh² + 3 behandlingar av mjuk peel

Kombination med medium peeling¹*




3 behandlingar of Z Fill refresh² + 2 behandlingar av mjuk peel + 1 behandling av Jessner S. medium peel + TCA 35%

Kombination med laser*

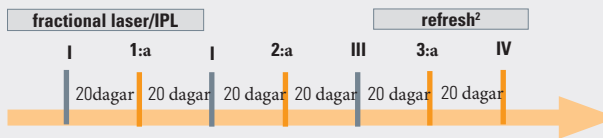

3 behandlingar av Z Fill refresh² + 4 behandlingar av fraktionerad laser / IPL 3 behandlingar of Z Fill refresh² + 1 behandlingar av Thermage

Kombination med radiofrekvens

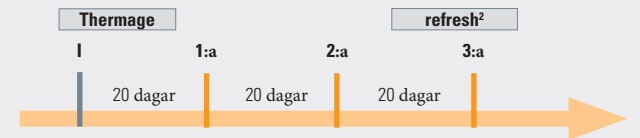

Studiedata:

¹ Hara M. & AI, Selectively reduced glycerol in skin of aquaporin-3-deficient mice June account for impaired skin hydration, elasticity and barrier recovery. J Biol. Chem. 277: 46616-46621, 2002

² Verdier-Sevrain S. & AI, Skin hydration: a review on its molecular mechanisms J Cosmet. Dermatol. 6, 75-82, 2007

³ Choi E.H. & AI, Is endogenous glycerol a determinant of stratum corneum hydration in humans, J Invest Dermatol. 125:288-293, 2005

⁴ AQP3: Aquaporin-3 is a protein channel that allows glycerol, to enter the epidermis.



Z Fill refresh² mesotherapy för naturlig regener ation

Z Fill contour² för ungdomliga utseende och perfekta läppar

Z Fill deep² Gel för medelstora och djupa rynkor



The appropriate blunt cannula

- 30G/25 mm: lämplig för ZFill refresh²
- 27G/40 mm: lämplig för ZFill contour² & ZFill refresh² (easy flow)
- 25G/50 mm: lämplig för ZFill contour² (easy flow) & ZFill deep²
- 23G/30 mm: lämplig för ZFill deep² (easy flow)

Zimmer
MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel. +49. 7 31. 97 61-291
Fax +49. 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer-aesthetic.de

Zimmer
AestheticDivision