



Z
fill

förungdomlig,
rynkfri hy

Anti-aging systemet för hud i alla åldrar

Zimmer



Den nya ZFill produktsortimentet



Endast högsta kvalitet förtjänar ditt förtroende.

Den renaste hyaluronsyra av icke-animalskt ursprung ligger till grund för den nya ZFill generationen från Zimmer MedizinSysteme. Produkten produktlinje omfattar tre injicerbara fyllmedel som täcker hela spektrumet av ansikts föryngring och volym augmentation.

Beprövad kvalitet från produkter som tillverkas i Europa

De tre hyaluronsyrafyllmedel i ZFill produktsortimentet tillverkas enligt strikta europeiska kvalitetsstandarder och säkerhets. De uppfyller ISO 9001, ISO 13485 och GMP (Good Manufacturing Practice) standarder och riktlinjer. Toxikologiska och biokompatibilitet tester genomförs i enlighet med ISO 10993-serien av standarder.

för naturlig hyaluronsyra behandling



100% biologiskt nedbrytbart.

Gelerna är extremt stabila på grund av en innovativ, flerstegstillverkningsprocess. Detta fördröjer kroppens egna nedbrytningsprocesser, vilket garanterar en långvarig effekt. En föryngring effekt syns omedelbart efter det hyaluronsyrabehandling. ZFill vitaliserar åldrande hud på ett sätt som varar. Det kompenserar åldersrelaterad förlust av hyaluronsyra och systematiskt återfuktar dermis.

ZFill refresh²

Mesotherapy för naturlig föryngring

ZFill contour²

För ett ungdomligt utseende och perfekt läppar.

ZFill deep²

Gel för måttliga och djupa rynkor.



Zimmer MedizinSysteme – en pålitlig partner i din framgång

Genom att välja ZFill du väljer du att köpa en produkt som levereras av Zimmer MedizinSysteme, en av de mest kända medicintekniska produkterna som tillverkas.

Dessutom kan du dra nytta över fyrtio års erfarenhet och kompetens inom området för medicinska devices, enastående service och bra kundsupport.

ZFill – de högsta kvalitetsprodukter för optimalt resultat

- Hyaluronsyran fyllmedel i ZFill serien är extremt homogena och smidig, vilket innebär att de kan injiceras lätt, jämnt och exakt.
- ZFill är mycket trögflytande, så att den penetrerar vävnader mycket väl.
- Detta garanterar en smidig övergång och naturligt utseende skönhet. Den kosmetisk effekt är uppenbart och omedelbart efter behandling, varar i flera månader.



naturlig skönhet i harmoni med naturen

En bra känsla. För dig och dina patienter.

- ZFill är allergen-fria och tolereras mycket bra.
- En grundlig rengöringsprocedur, avlägsnande syre och sterilisering av hyaluronsyra förhindrar biverkningar.
- ZFill produkter tillverkas i Europa och uppfyller höga europeiska standarder. De är ett resultat av pågående forskning.
- De enastående flödesegenskaper ZFill implantat betyder att de kan administreras med tunna kanyler.

Säkerhet och komfort

- Steril glasspruta
- Speciellt utformade kolvstång
- Ergonomiskt fingerstöd (roterar 360 °)
- Stabilitet och god kontroll under hela behandlingen






Högsta renhet
för maximal säkerhet

Kvalitet för bestående effekter

1. Grunden för ZFill är ren hyaluronsyra av icke-animaliskt ursprung som erhållits från Biofer-förändet. En särskild process används först för att noggrannt inriktning av molekylkedjorna.
2. Tvärbinding: BDDE tillsätts för att bygga tvärbindingar mellan hyaluronsyrakedjor. Detta skapar en mycket tät, tre-dimensionell matris, vilket gör gelén mer stabil och förmågan att motstå nedbrytningsprocesser i huden. - Det är därför effekterna av ZFill contour² och ZFill deep² pågå så länge.
3. Produkten homogeniseras sedan. Gelen är nu viskös och också mycket mjuk och elastisk - perfekt för jämn, kontrollerad injektion genom tunna kanyler.
4. Detta följs av en komplex rengöringsprocedur. Alla överflödiga - och skadliga ämnen (obunden BDDE, proteiner och endotoxiner) avlägsnas omsorgsfullt. Resultatet-mycket hög renhet, klart över de strikta kraven i EU-direktivet medicintekniska produkter.
5. Gelén sedan har dess syre avlägsnas, vilket resulterar i ännu högre stabilitet och en mycket längre hållbarhet.
6. I det sista steget fylls gel injektionssprutor och steriliseras i en ångautoklav.
7. Varje enskild spruta genomgår sedan en visuell inspektion för att se till att den är fri från partiklar. Varje ZFill sats släpps först efter nödvändiga produktions- och säkerhetstesterna har utförts i enlighet med de senaste europeiska normer.

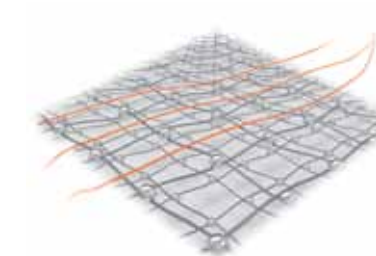

Z Hela sortimentet:
optimala resultat med tre olika
produkter



Z Fill refresh² för naturlig
föryngring och vitalisering av
 huden.

Z
fill



Hyaluronat

Koncentration	18 mg / ml
Stabilisator Sterilitet	Glycerin
pH	sterile
Dynamisk viskositet	7,0
Innehåller kanyl	~ 150.000 mPa·s
	1 ml
	30G ½

ZFill refresh² för mesotherapy i ansiktet, halsen, ryggen på händerna och överarmarna

Gelén är tillverkad av högkoncentrerad hyaluronsyra och glycerin, en naturlig fuktighetskräm. Denna icke-tvärbundna, biologiskt effektiv hyaluronsyra, berikad med ytterligare beståndsdel, ger huden fukt en varaktig uppsving. Det återställer hyaluronsyra som huden förlorar naturligt med åldern. Samtidigt, glycerin fallor vatten och återfuktar huden under ett antal månader. Som ett resultat blir det mer tonad och synliga tecken på åldrande minskar.

Egenskaper: En transparent gel som är steril, viskoelastiska, isoton och biologiskt nedbrytbart.

Effekten varar i: Tre behandlingar rekommenderas under de första 2 månaderna och effekten varar i 3 till 4 månader efter det.

Behandlingsområden

Ansikte

Hals

Halskant

Handryggar

Överarmar

refresh²

Z
fill

contour²

Z Fill contour² håller ansikte och läppar naturligt vackert i månader



Tvärbunden hyaluronsyra

Koncentration	23 mg / ml
Tvärbindande	BDDE
Sterilitet	steril
pH	7,0
Dynamisk viskositet	~ 500.000 mPa-s
Innehåller kanyl	1 ml 27G ½

Treatment areas

Brow lines

Glabella lines

Periorbital wrinkles

Nasolabial lines

Marionette lines

Lip volume
and lip contours

ZFill contour²

för ett ungdomligt utseende och perfekt läppar

Av implantatet tillverkade av tvärbunden hyaluronsyra jämnar ut SuperFi-siella till måttliga och mindre djupa linjer i ansiktet. De fyller på fuktdeppår och föryngra huden genom att ge långvarig fukt. Du kan också använda Z Fill contour² att betona konturen av Vermilion gräns eller för att förstora volymen av röda läppvävnad, vilket resulterar i mer harmoniska och attraktiva läppar.

Egenskaper: steril, isoton och biologiskt nedbrytbar, viskoelastiska, helt transparent och färglös, homogeniseras och monofasisk

Effekten varar i: 6 – 9 månader

Z Fill deep² ger ny fyllighet och mer volym

Z
fill



Högradigt tvärbunden hyaluronsyra

HA-koncentrationen	23 mg / ml
Tvärbindande	BDDE
Sterilitet	steril
pH	7,0
Dynamisk viskositet	~ 1.000.000 mPa·s 1 ml
Innehåller kanyl	27G ½

ZFill deep² Implantat för djup behandling

Kraftigt tvärbunden hyaluronsyra återställer fukt och elasticitet till trött hud. ZFill deep² är lämplig för att korrigera måttliga till djupa linjer, rynkor och insjunkna hudområden. Det är också perfekt för att förbättra ansiktskonturer och öka volymen. På grund av deras enastående viskoelastiska egenskaper, kan implantatet injiceras genom en tunn nål med lätthet och precision. Den kosmetisk effekt är omedelbar och varar i upp till ett år.

Egenskaper: monophasic, steril, isoton och biologiskt nedbrytbar, viskoelastiska, klar och homogeniserad

Effekten varar i: 8 – 12 månader

deep²

Behandlingsområden

Kinder

Nasolabiala linjer

Marionette linjer

Haka

Infallna områden i ansiktet



ZFill: För perfekta konturer.

Pannan linjer ("bekymmersrynkor")

ZFill contour², ZFill refresh²

Glabella linjer ("rynliga pann linjer")

ZFill contour², ZFill refresh²

Periorbital linjer ("kråksparkar")

ZFill contour², ZFill refresh²

Insjunkna kinder

ZFill deep²

Nasolabiala linjer

ZFill contour², ZFill refresh², ZFill deep²

Perioral linjer (för rökare eller läppstift)

ZFill contour², ZFill refresh²

Läppar


ZFill contour²

Marionette linjer runt ögonen

ZFill contour², ZFill refresh², ZFill deep² Nacke,
rhytides

hals, handryggar, överarmar

ZFill refresh²

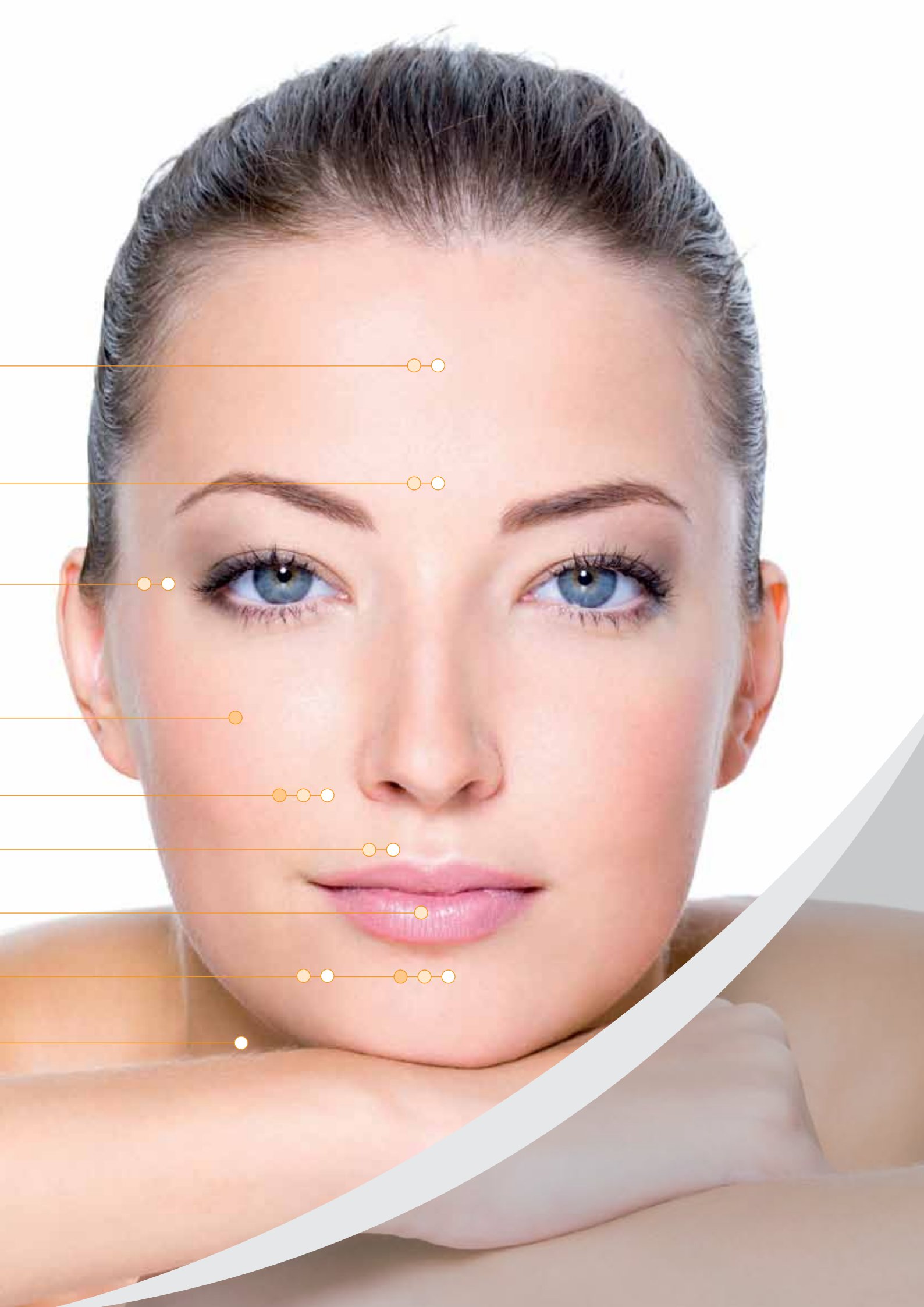

**Använda Cryo 6 Derma kallluft maskin vid
behandling fyllmedel**

Kyla huden till ca 10-15 ° C under några sekunder innan du ger injektionen för att producera ett smärtstillande effekt. Injicera Z Fill försiktigt men snabbt in i huden och massera det behandlade området för att fördela produkten jämnt och förhindra biverkningar.

Även utan ett bedövningsmedel, upplever patienter betydligt mindre smärta och tolererar behandlingen mycket bättre. En kort period av efterkylning förhindrar också fula svullnad och rodnad. Dina patienter bör använda den mimetiska muskulaturen så lite som möjligt upp till två timmar. Detta hjälper implantatet integreras i den omgivande cellkluster.

Praktiskt taget smärtfritt förfarand




Fördelar för läkare och patienter:

- Din patient behöver inte genomgå en anestesi
- Du kan börja arbeta omedelbart, utan att invänta den anestetiska effekten
- Det finns inga oönskade interaktioner mellan olika substanser injiceras

Diagram "minskad smärtekänslighet"
BTX, fyllmedel och kirurgi

skala av smärta känsla

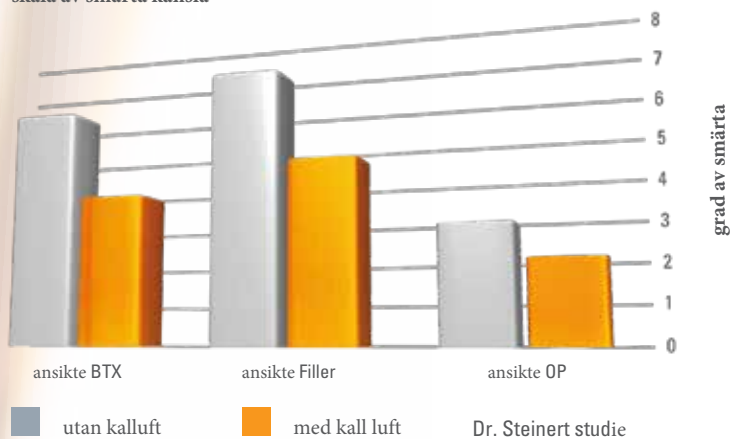

Studier visar att Cryo 6 Derma minskar smärta i samband med ansiktsbehandlingar betydligt

Anti-aging systemet för hud i alla åldrar

Produkt	ZFill re-fresh ² hyaluronsyrage	ZFill contour ² hyaluronsyra syra gel-implantat	ZFill deep ² hyaluronsyra syra gel-implantat
Behandlingsalternativ	Mesotherapy, varaktigt hydratisering och vitalisering	Korrigerig av ytliga och djupa linjer i ansiktet, läppkonturer och läppvolymen	Korrigerig av djupa linjer och rynkor, sjunkna hudområden, ansiktskonturer och ökad volym
Områden som skall behandlas	Ansikte, hals, hals, handryggar, överarmar	Panna linjer, glabella linjer, periorbitalt rynkor, nasolabiala linjer, periorbitala rhytides, marionettlinjer, läppvolym och läppkonturer	Kinder, nasolabiala linjer, marionette linjer, haka, sjunkna ansiktet områden
Hyaluronsyra koncentration	18 mg/ml	23 mg/ml	23 mg/ml
Stabilisator/tvärbinding	Glycerin	BDDE	BDDE
Grad av tvärbinding	-	+	++
Molekylvikt Injection	2,5 mio. daltons	2,5 mio. daltons	3 mio. daltons
djup	Övre dermis	Mellan dermis	Undre dermis
Effekten varar i	3 - 4 månader efter 3 tbehandlingar under de första två månaderna	6 - 9 månader	8 - 12 månader
Förpackning	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml
Kanyl	2 x 30G ½	2 x 27G ½	2 x 27G ½

Marknadsföringsmaterial



Zimmer
MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Germany
Tel. +49. 7 31. 97 61-291
Fax +49. 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer-aesthetics.com